



Простая подача кислорода

Концентратор кислорода **EverFlo**

Компактный и легкий концентратор кислорода EverFlo производства компании Philips Respironics производит положительное впечатление на врачей и пациентов. Обтекаемый эргономичный дизайн концентратора EverFlo упрощает его хранение и транспортировку по сравнению с другими концентраторами. Кроме того, это одно из наиболее бесшумных и энергоэкономичных устройств на сегодняшний день. Благодаря отсутствию фильтров, требующих регулярного обслуживания, долговечному выходному патрубку для подачи кислорода и минимальному количеству запчастей концентратор EverFlo отличается стабильной и бесперебойной работой.

PHILIPS
RESPIRONICS




За литую рукоятку удобно брать одной и двумя руками при переноске



Держатель емкости для увлажнителя совместим с емкостями любых типов



Внутреннее расположение трубок делает систему удобной в эксплуатации

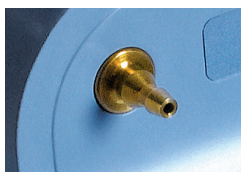

Соединитель металлической канюли увеличивает срок службы



Заглубленное расположение датчика потока снижает риск его повреждения



Панель управления с сетевым тумблером и индикаторами тревоги

Технические характеристики	
	Стандартное исполнение
Питание	230 В, 50 Гц
Объемный расход	0,5–5 л/мин
Уровень шума	43 дБ(А)
Чистота кислорода	90–96 %
Масса	14 кг
Размеры (В × Ш × Г)	580 × 380 × 240 мм
Уровни сигнализации индикатора содержания кислорода (ОРІ)	Низкое содержание кислорода: 82 %, очень низкое содержание кислорода: < 70 %
Регламентное техническое обслуживание	Фильтр на входе компрессора: раз в 2 года. Дисковый микрофильтр: по необходимости
Потребляемая мощность	< 300 Вт
Кат. номера	1020006 Европа

Philips Respironics и EverFlo являются товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и ее филиалов. Все права защищены



© Koninklijke Philips N.V., 2014 г. Все права защищены.

Компания Philips Healthcare оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики оборудования и/или в любое время прекратить производство того или иного изделия без предварительного уведомления или обязательств и не несет ответственности за любые последствия, возникшие в результате использования данного документа.

AF 12/15/14 MCI 4106502

Philips Respironics Russia
+8 (800) 200 08 81
(звонок по России бесплатный)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 США

Как с нами связаться:
www.healthcare.philips.com/ru
PHC.Russia@philips.com